

# WEICHE MONATSLINSEN

## BLU:GEN

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILIKON-HYDROGEL



**Blu:gen** ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit selektivem Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen gegen mindestens 99% der UVB-Strahlen, 93% der UVA-Strahlen und 14% des schädlichen blau-violetten Lichts kombiniert. Das Material mit hohem Wasseranteil und geringer Dehydrierung bietet den niedrigsten Modulus aller Silikon-Hydrogel-Linsen auf dem Markt (0.25 Mpa) und ermöglicht dem Träger damit ein gesundes, komfortables Trageerlebnis über den ganzen Tag.



SPHÄRISCH



MULTIFOKAL



TORISCH




MULTIFOKAL TORISCH

### PARAMETER

BASISKURVE/RADIUS (mm)	6.50 bis 9.80 (0.30 Abstufung)
DURCHMESSER (mm)	11.50 bis 16.50 (0.50 Abstufung)
SPHÄRE (Dpt)	+/- 30.00 (0.25 Abstufung)
ZYLINDER (Dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25 Abstufung)
ACHSEN (°)	Alle (1°)
ADDITION	0.50 bis 4.00 (0.25 Abstufung) CD/CN

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

TYP	Filcon 5B (60) [75%]
SELECTIVEN BLAULICHT FILTER	Ja - filtert mindestens 14% des schädlichen blau-violettem Lichtes
1STE KLASSE UV-SCHUTZ	Ja - filtert mindestens 93% von UVA- und 99% von UVB-Licht
WASSERGEHALT	75%
MITTENDICKE (bei -3.00 Dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (bei -3.00 Dpt)	48
HANDLINGSTÖNUNG	GRÜN
MODULUS	0.23
UV-SCHUTZ	JA
VERPACKUNGSEINHEIT	3er/6er Boxen
HERSTELLUNGSPROZESS	GEDREHT
CoF	0.09

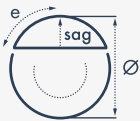


### Brauchen Sie Anpassempfehlung?


Berücksichtigen Sie unseren Anpassleitfaden auf Seite 25.

### OPTISCHES DESIGN


#### SPHÄRISCH

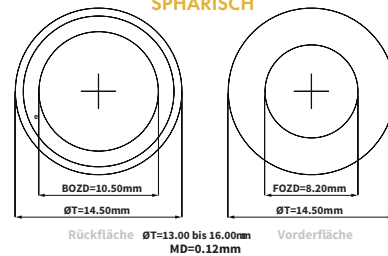


#### TORISCH

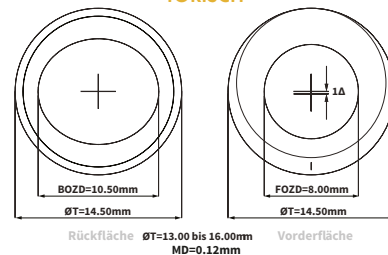

#### MULTIFOKAL

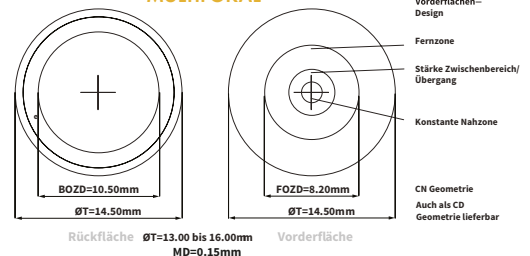

#### MULTIFOKAL TORISCH

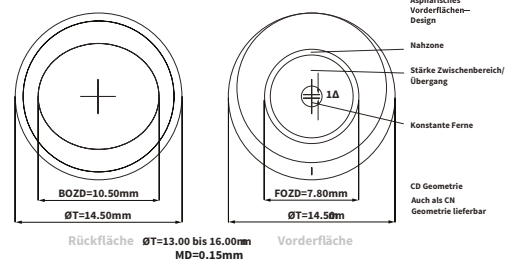

Die Designparameter der Kontaktlinse können stärkenabhängig variieren.

### SIE BENÖTIGEN ANPASSUNTERSTÜTZUNG? SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN

Customer Care DE: 0800 447 4476  
Customer Care AT: 0800 123 846  
Customer Care CH: 0800 131 132

mark'envoy gmbh Blumenstr. 19 - 73728 Esslingen

Kontakt AT: Bilosa Handels GmbH  
Telefon AT: +43 - 512 57 63 86

mark'envoy