

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



**Gentle 59** est une lentille en hydrogel conçue pour imiter les propriétés naturelles de la cornée. Elle associe un coefficient de friction bas ( $CoF = 0,05$ ) à une faible déshydratation ( $< 1\%$ ) pour un excellent confort. Son module d'élasticité ( $0,36$  Mpa) a été soigneusement calibré pour obtenir une manipulation et une qualité de vision optimale tout au long du cycle de vie de la lentille en assurant un port sain et confortable.



SPHÉRIQUE



MULTIFOCALE



TORIQUE




MULTIFOCALE TORIQUE

### PARAMÈTRES

RAYONS DE COURBURE (mm)	7.10 à 9.80 (0.30)
DIAMÈTRES (mm)	13.00 à 16.00 (0.50)
SPHÈRE (D)	$\pm 30.00$ (0.25)
CYLINDRES (D)	-0.75 à -8.00 (0.25)
AXES (°)	Tous ( $1^\circ$ )
ADDITION	0.50 à 4.00 (0.50) CD/CN

### MATÉRIAU

TYPE	Filcon 2 (30) [59%]
TENEUR EN EAU	59%
ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	30
DK/T (-3.00 D)	26
TEINTE DE MANIPULATION	BLEUE
MODULE	0.36
BLOCAGE DES RAYONS UV	OUI
FORMAT	Boîte de 3 lentilles
PROCESSUS DE FABRICATION	TOURNAGE
CoF	0.05

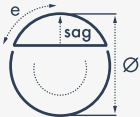


### Besoin d'un conseil d'adaptation?


Consultez notre guide d'adaptation en page 24 de ce catalogue.

### DESIGN OPTIQUE


#### SPHÉRIQUE

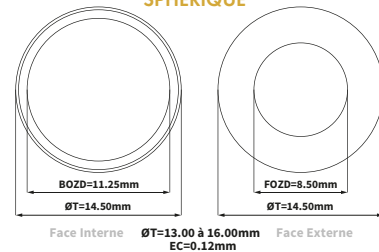


#### TORIQUE

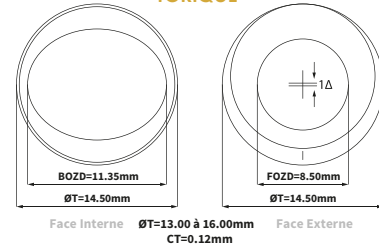

#### MULTIFOCALE

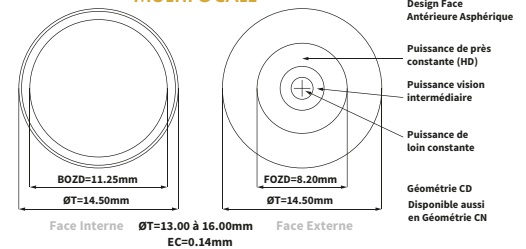

#### MULTIFOCALE TORIQUE

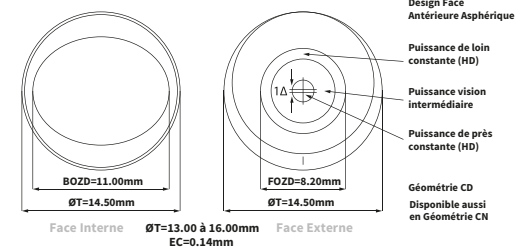

Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
International Customer Care: T. +34 916 496 124  
E: mksservices@markennovy.com

markennovy