

# LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

## GENTLE 80

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



**Gentle 80** est une lentille hydrogel conçue pour imiter les propriétés naturelles de la cornée. Le matériau associe une haute teneur en eau, une faible déshydratation et le module d'élasticité le plus bas du marché (0,05 MPa) et une transmission de l'oxygène qui atteint les niveaux du silicone hydrogel ( $Dk = 60$ ) pour un port sain et confortable.

-  SPHÉRIQUE
-  MULTIFOCALE
-  TORIQUE
-  MULTIFOCALE TORIQUE

### PARAMÈTRES

<b>RAYONS DE COURBURE (mm)</b>	7.10 à 9.80 (0.30)
<b>DIAMÈTRES (mm)</b>	13.00 à 16.00 (0.50)
<b>SPHÈRE (D)</b>	±30.00 (0.25)
<b>CYLINDRES (D)</b>	-0.75 à -8.00 (0.25)
<b>AXES (°)</b>	Tous (1°)
<b>ADDITION</b>	0.50 à 4.00 (0.50) CD/CN





### MATÉRIAU

<b>TYPE</b>	Filcon 2 (60) [80%]
<b>TENEUR EN EAU</b>	80%
<b>ÉPAISSEUR CENTRALE (- 3,00 dpt)</b>	0.14
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	60
<b>DK/T (-3.00 D)</b>	42
<b>TEINTE DE MANIPULATION</b>	BLEUE
<b>MODULE</b>	0.13
<b>BLOCAGE DES RAYONS UV</b>	OUI
<b>FORMAT</b>	Boîte de 3 lentilles
<b>PROCESSUS DE FABRICATION</b>	TOURNAGE
<b>CoF</b>	0.05

### Calcul de la lentille

LØ (mm)	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00
RC (mm)	7.10-8.90	7.10-9.20	7.40-9.50	7.70-9.80	8.00-9.80	8.30-9.80	8.60-9.80
RÈGLE D'ADAPTATION $K_m = (K_1 + K_2)/2$	$K_m + 0.0$	$K_m + 0.0$	$K_m + 0.1$	$K_m + 0.3$	$K_m + 0.5$	$K_m + 0.7$	$K_m + 0.9$

### DESIGN OPTIQUE

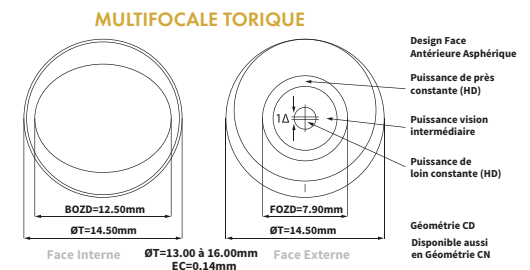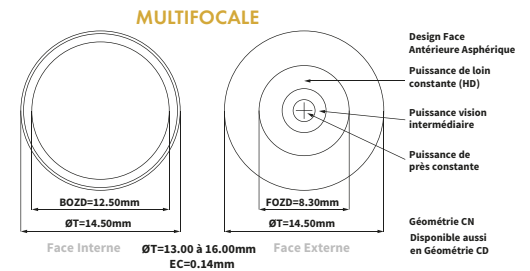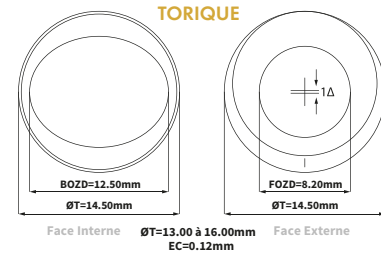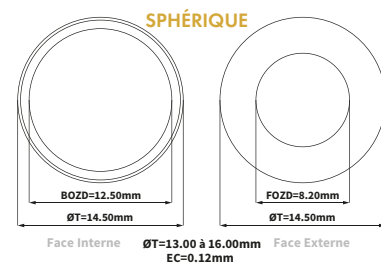

Les paramètres d'une lentille peuvent changer selon la puissance.

### CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90  
International Customer Care: T. +34 916 496 124  
E: mksservices@markennovy.com

**markennovy**