

MENSILI

GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



Gentle 59 è una lente a contatto bio-ispirata in Hydrogel, disegnata per imitare le proprietà naturali della cornea. Combina un'alta lubricità di superficie (Cof 0.05) ad una bassa disidratazione (< 1%) per un eccellente comfort. Il suo modulo di elasticità (0.36 Mpa) è stato attentamente calibrato per ottenere un'ottima manipolazione e qualità della visione durante il ciclo di vita della lente senza ridurre il comfort e la salute oculare.







PARAMETRI

CURVA BASE (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
DIAMETRO (mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
SFERA (D)	±30.00 (0.25)
CILINDRO (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSE (°)	Tutti (1°)
ADDIZIONE	0.50 a 4.00 (0.50)


MATERIALE

TIPO	Filcon 2 (30) [59%]
CONTENUTO D'ACQUA	59%
SPESORE CENTRALE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	30
DK/T (-3.00 D)	26
TINTA DI VISIBILITÀ	BLU
MODULO	0.36
UV BLOCKING	SI
CONFEZIONE DA	3 o 6
PROCESSO DI PRODUZIONE	TORNITURA
CoF	0.05

GEOMETRIA

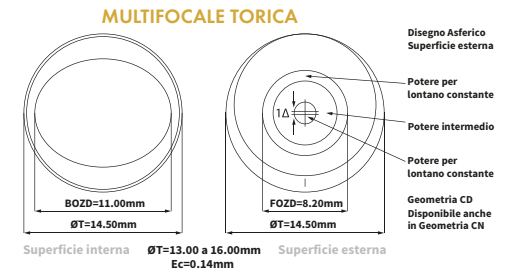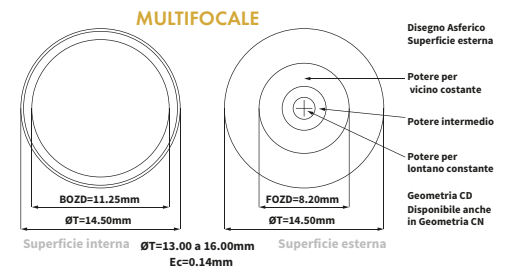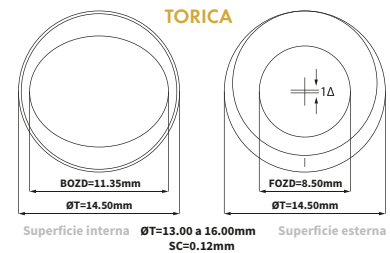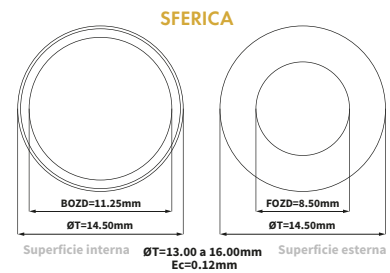

La geometria della lente può cambiare a seconda del potere

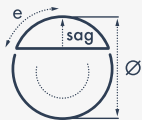

Hai bisogno di consigli per l'applicazione?

Consulta la nostra guida applicativa alla pagina 24 di questo catalogo

CONTATTI IL SUO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

T. 800 719 481
 F. 800 719 427
 I. +34 91 649 61 26
 E. ordini@markennovy.com
 www.markennovy.com

markennovy