

MAANDLENS

GENTLE 80

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



Gentle 80 is een biologisch geïnspireerde hydrogel lens die zo werd ontworpen dat deze de natuurlijke eigenschappen van de cornea imiteert door de combinatie van een lage modulus (0,13 MPa) en een watergehalte van 80%. De lens heeft dezelfde zuurstofdoorlaatbaarheid (Dk 60) als onze SiHy-familie. Gentle 80 is geschikt voor droge ogen met normale traanfilm. Vooral voor vrouwen vanaf 40 jaar met droge ogen kenmerken de Gentle 80 als zeer aangenaam en geeft de Gentle 80 de voorkeur boven de siliconen hydrogel lens. De lens is voorzien van een Klasse 1 UV-filter.







PARAMETERS	
BASIS CURVE (mm)	7.10 tot 9.80 (0.30)
DIAMETER (mm)	13.00 tot 16.00 (0.50)
SFERISCHE STERKTES (D)	±30.00 (0.25)
CILINDER (D)	-0.75 tot -8.00 (0.25)
AS (°)	Alle (1°)
ADDITIE	0.50 tot 4.00 (0.50) CD/CN

MATERIAAL	
TYPE	Filcon 2 (60) [80%]
WATERGEHALTE	80%
CENTRALE DIKTE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	42
HANDLINGS TINT	BLAUW
MODULUS	0.13
UV FILTER	JA
VERPAKKINGS GROOTTE	3 & 6-pack
PRODUCTIEPROCES	LATHED
CoF	0.05

Bereken uw lens							
DiaØ (mm)	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00
BCR (mm)	7.10 - 8.90	7.10 - 9.20	7.40 - 9.50	7.70 - 9.80	8.00 - 9.80	8.30 - 9.80	8.60 - 9.80
Aanpas regel $K_m = (K1+K2)/2$	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

LENSONTWERPEN

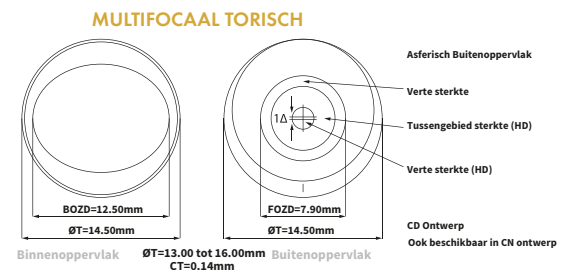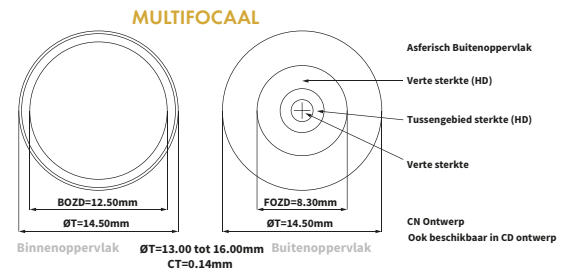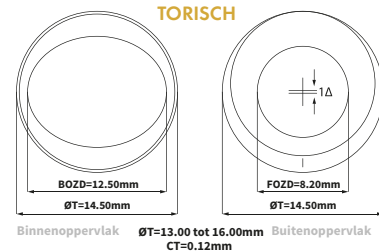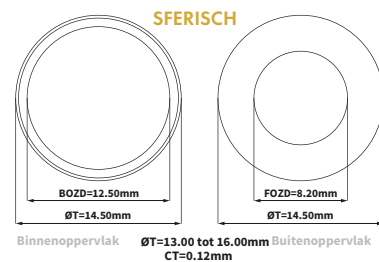

De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

markennovy