

CONTACTLENS VLOEISTOF

PEROXIDE SYSTEEM



Ons peroxide vloeistof is een 1-staps peroxide systeem met een vitamine B2 kleur indicator voor het reinigen van alle soorten materialen: hard, zacht en silicone hydrogel lenzen. De neutralisatie tablet met kleur indicator en vitamine B2 heeft de eerste 12 minuten geen werking en zijn er geen belletjes te zien totdat de coating van de tablet oplost en de lenzen schoon worden gebruikt en geneutraliseerd. Na 1 uur is er een conserverings-vrije saline over.

VERPAKKINGS GROOTTE (60mL) 10
VERPAKKINGS GROOTTE (360mL) 20

SAMENSTELLING


Desinfectie vloeistof: Hydrogen peroxide 3%.
Neutraliserings tablet: Sodium chloride, disodium fosfaat, polyvinylpyrrolidone, Vitamine B2, catalase 0.1 mg en hulpstof Q.S.
Conserveringsmiddel vrij

VOORDELEN

Optimale desinfectie zonder bubbels
Snel werkend
Verwijdert proteïne
Conserverings middel vrij
MEt een bevochteraar voor droge ogen
Met een vitamine B2 kleur indicator tablet

DESINFECTIE & NEUTRALISATIE PROCES

Ons peroxide systeem desinfecteert in 12 minuten en het geheel proces (desinfectie + neutralisatie) duurt slechts 1

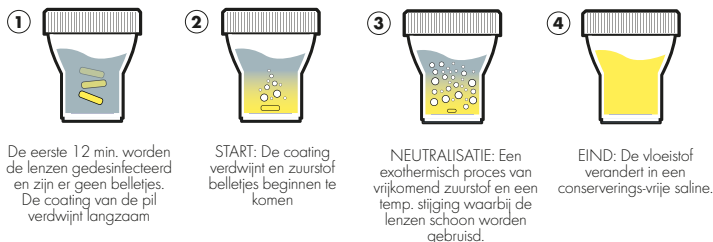

ANDERE INDICATIES EN AANBEVELINGEN

Gevoelige en normale ogen

Voor alle contactlens dragers (silicone hydrogel, hydrogel, RGP en Ortho-K) met gevoelige ogen of met normale ogen, kunnen de lenzen met saline afspoelen voor het inzetten als dat nodig is.

Vettige ogen

Voor conventionele hydrogel, RGP en Ortho-K contactlens dragers die wat vettige ogen hebben kunnen additioneel een isopropyl alcohol cleaner en saline gebruiken voor het afspoelen van de lenzen.

Droge ogen

Voor RGP en Ortho-K lensdraggers met droge ogen kunnen bevochtigings druppels of een liposome oog spray naast de vloeistof worden gebruikt

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

markennovy