

# SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO

## SISTEMA DE PERÓXIDO



Nuestro sistema de peróxido en un solo paso contiene un indicador de color amarillo a base de vitamina B2. Desinfecta de forma rápida e integral cualquier tipo de lente de contacto blanda o rígida, incluidas las blandas de hidrogel de silicona. La pastilla neutralizadora tiene un recubrimiento que se disuelve durante una primera fase de desinfección de 12 minutos de duración y que completa el proceso de neutralización durante la hora siguiente dando paso a una solución salina sin conservantes.

FORMATO (60mL) 10

FORMATO (360mL) 20

### COMPOSICIÓN


Solución desinfectante: Peróxido de hidrógeno 3%, estabilizado.  
Comprimido neutralizador: Cloruro sódico, polivinilpirrolidona, fosfato disódico, vitamina B2, 0,1 mg de catalasa y excipiente c.s.  
No contiene conservantes.

### BENEFICIOS

Desinfección óptima sin burbujas  
Acción rápida  
Elimina proteínas  
Sin conservantes  
Con agente humectante para un porte más cómodo  
Con pastilla con colorante a base de vitamina B2

### PROCESO DE DESINFECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN

Nuestro sistema de peróxido desinfecta en 12 minutos y termina el proceso completo de desinfección y neutralización en una hora.

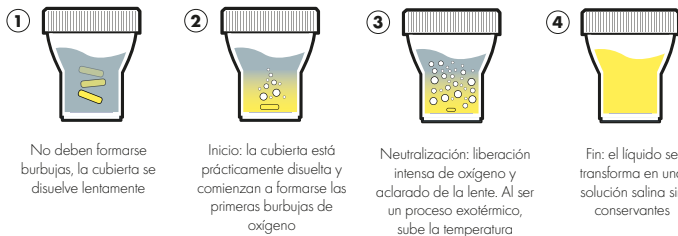

### OTRAS INDICACIONES

#### Ojos normales o sensibles

Para todos los usuarios de lentes de contacto (hidrogel de silicona, hidrogel convencional, RPG y orto-k) con ojos sensibles o normales, se puede recomendar el aclarado con solución salina antes de la inserción.

#### Ojos grasos

Para los usuarios de hidrogeles convencionales, RPG y orto-k con tendencia al ojo graso, la limpieza de la lente de contacto se puede complementar con un limpiador con alcohol isopropílico y solución salina para aclarar.

#### Ojos secos

Para los usuarios de RPG y orto-k con síntomas de ojo seco, se puede recomendar el uso de gotas lubricantes o de spray con liposomas para complementar el proceso de limpieza.

**PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO  
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES**

T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21

F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18

E: [mkservices@markennovy.com](mailto:mkservices@markennovy.com)

**markennovy**